

OMRON



야간자동혈압측정기

HEM-7080 IC



판매원



동아ST

야간 수면시의 자동 측정과 컴퓨터로의 측정 데이터의 관리·분석이 가능한 야간 자동혈압계입니다. 350회 측정 기록(측정치+메모)으로 일상 진료에 있어서 가정 혈압의 관리·분석·치료에 도움이 됩니다

야간 수면 시 자동측정 가능

컴퓨터를 통한 설정으로, 3가지 방식(①정시측정, ②인터벌측정, ③정시측정+인터벌측정)의 측정 방법에 따라 야간 수면시의 자동 측정이 가능합니다.



①정시측정


미리 설정한 시간에 자동혈압 측정기능
4회 설정 가능

②인터벌측정

취침 스위치를 누르고 나서 일정시간이
경과한 후 혈압측정 가능
4회 설정 가능

③정시측정+인터벌측정

정시측정과 인터벌측정을 동시 측정하는 기능
총 8회 설정 가능

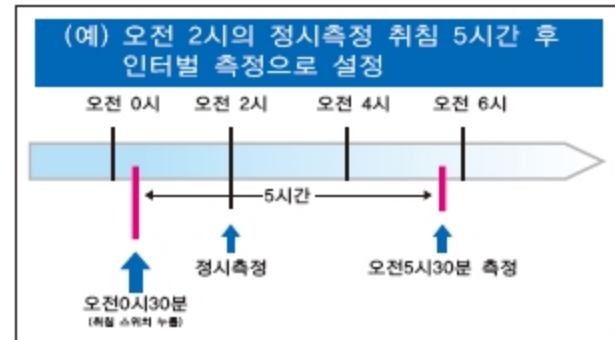

고혈압의 기준

최근 세계 주요 학회에서는 가정 혈압에 대한 고혈압의 기준을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

최고혈압
(수축기 혈압)

135mmHg이상

최저혈압
(이완기 혈압)

85mmHg이상

출처 : 일본고혈압학회 고혈압치료 가이드라인 2009

350회 측정 기록(측정치+메모)


측정치와 메모(약의 복용이나 컨디션 불안시)를 350회 기록할 수 있으므로, 측정자의 생활 습관을 포함한 가정 혈압의 관리나 치료에 도움이 됩니다.

간편한 사용법과 대형 액정

측정 버튼을 크게 하여 누구나 쉽게 측정할 수 있고 대형 액정을 통한 결과 수치를 확인할 수 있습니다.

측정 데이터를 컴퓨터로 관리·분석 할 수 있습니다.
 컴퓨터에서 데이터를 그래프, 수치표시와
 CVS 형식으로의 출력이 가능합니다.

결과표시

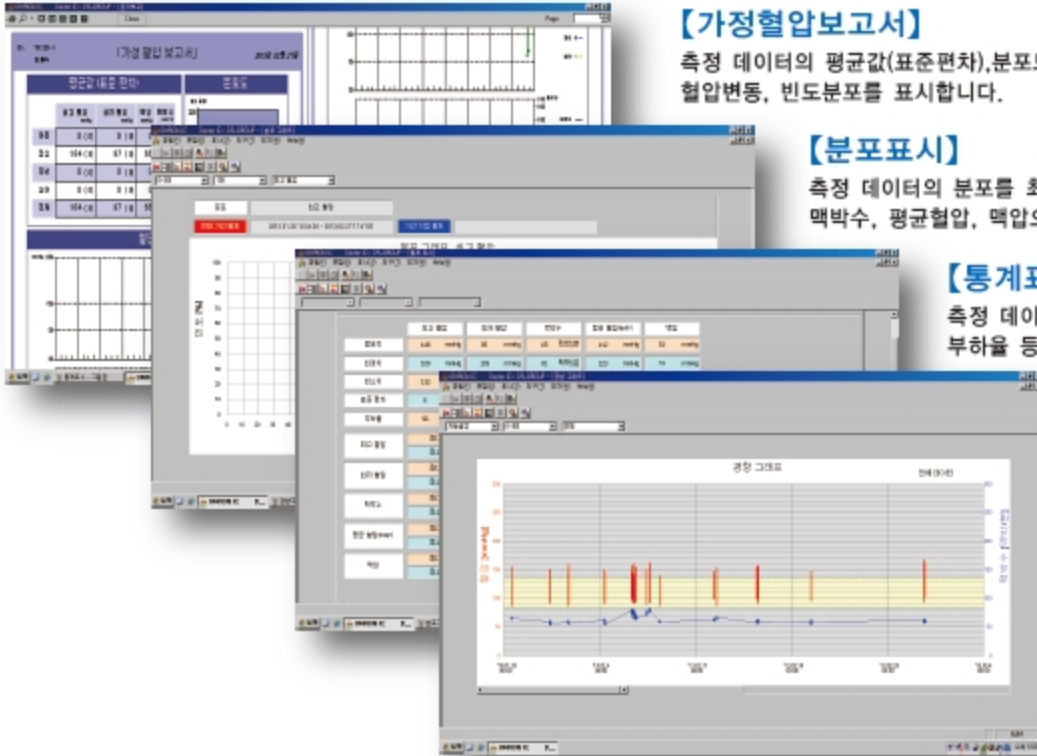

【가정혈압보고서】

측정 데이터의 평균값(표준편차), 분포도, 혈압변동, 빈도분포를 표시합니다.

【분포표시】

측정 데이터의 분포를 최고혈압, 최저혈압, 맥박수, 평균혈압, 맥압으로 나누어 표시합니다.

【통계표시】

측정 데이터군의 평균치, 최대치, 최소치, 표준편차, 부하율 등 통계적인 수치를 표시합니다.

【경향표시】

측정 데이터를 시간 순서에 따라 표시합니다. 혈압은 막대그래프, 맥박은 꺾인선 그래프로 표시합니다.


컴퓨터를 통한 데이터 관리·분석



The Ohasama Study

135/85 mmHg

The global standard for home blood pressure measurement was developed out of the desire for a vibrant and healthy life.

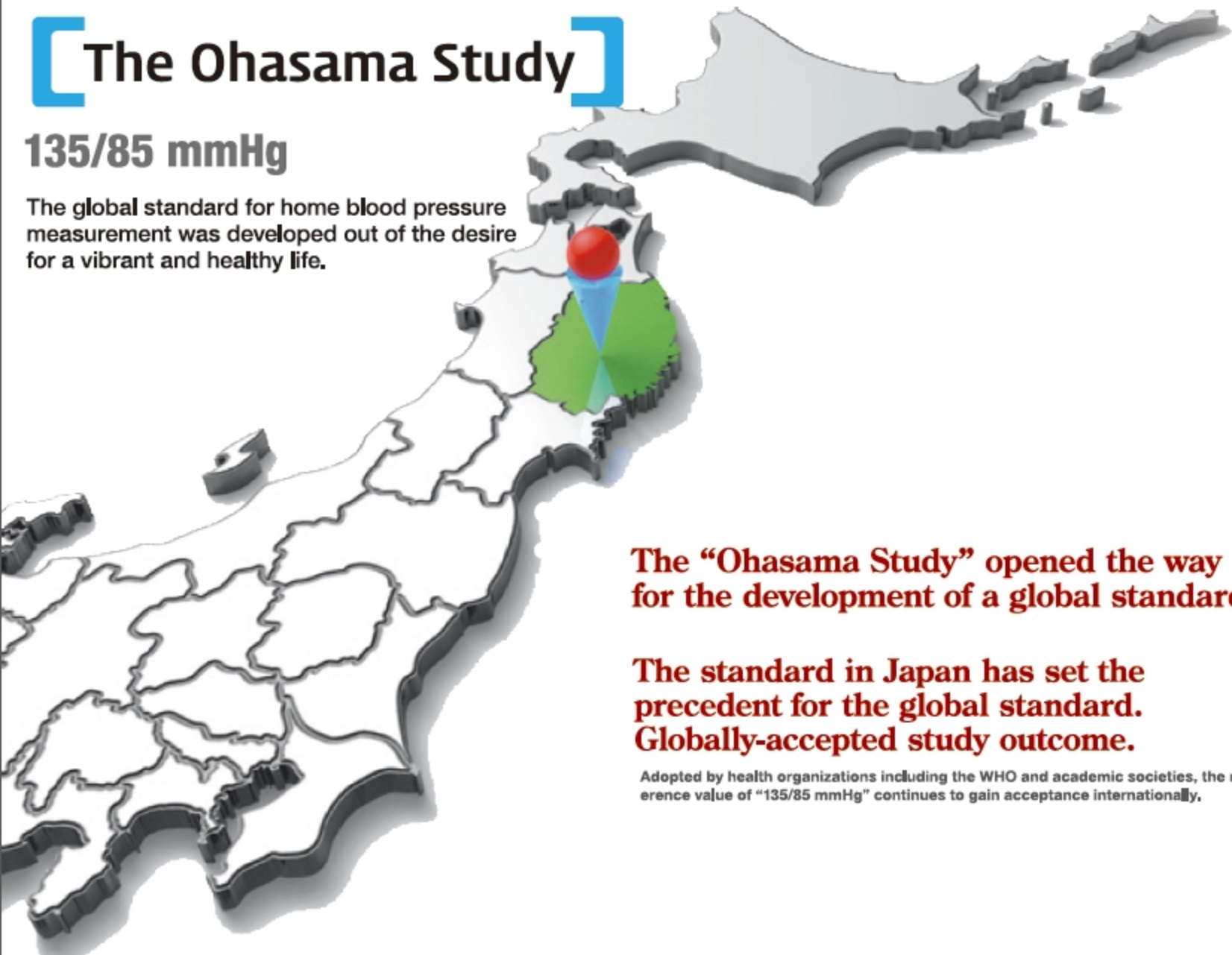


The “Ohasama Study” opened the way for the development of a global standard.

The standard in Japan has set the precedent for the global standard. Globally-accepted study outcome.

Adopted by health organizations including the WHO and academic societies, the reference value of “135/85 mmHg” continues to gain acceptance internationally.

OMRON Home BP is Ranked NO.1 in the global market

dabl® Educational Trust
Blood Pressure Monitors - Validations, Papers and Reviews
AAMI, BHS, ESH

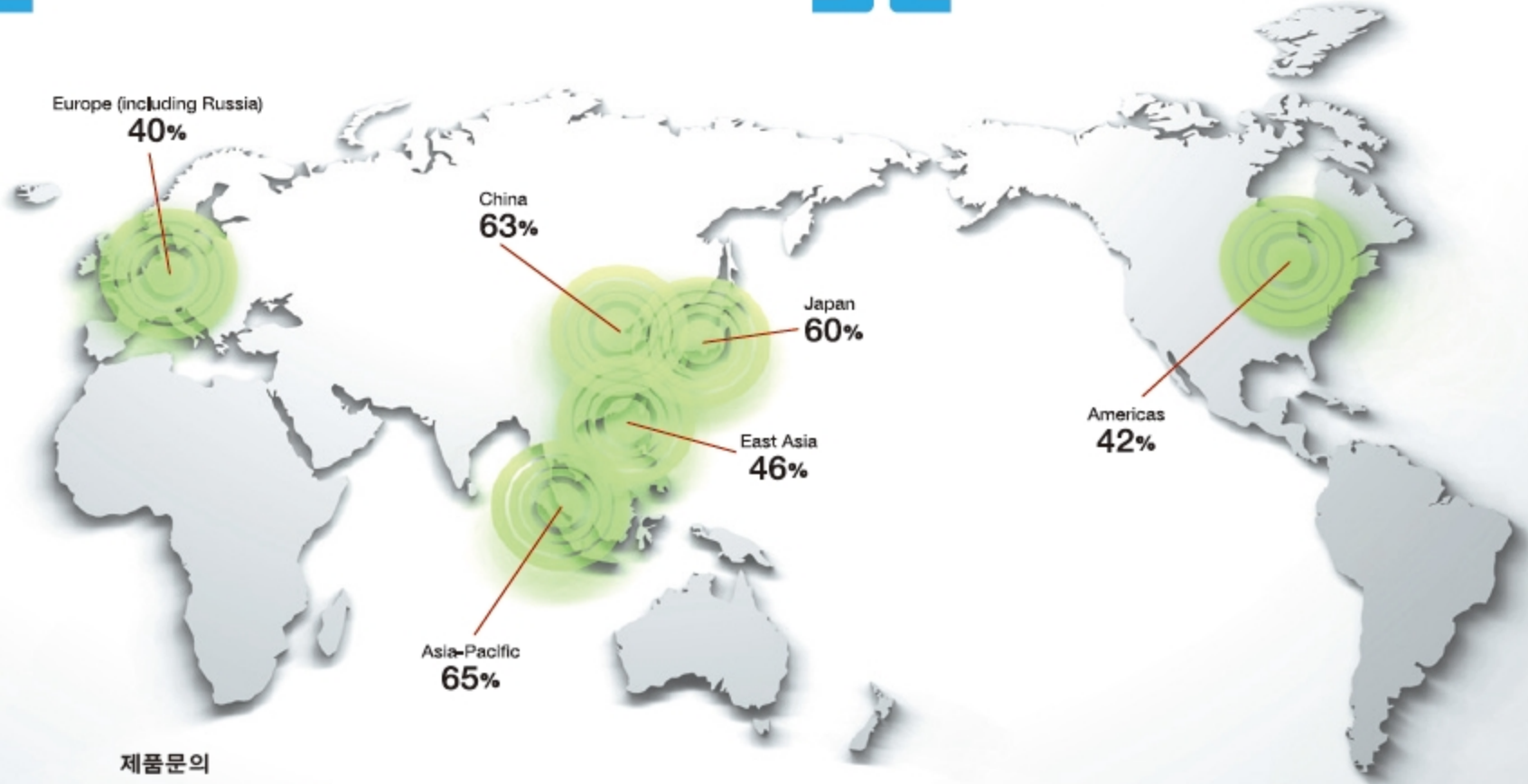

제품문의
동아 ST

주소: 서울시 동대문구 천호대로 14길 18
전화: 02-2173-7101, 7100
팩스: 02-924-5023

제조원
OMRON